



VENUS EPILEVE

KOSTENEFFIZIENTE
HAARENTFERNUNG
TISCHGERÄT



KOSTENEFFIZIENT



EINFACHE BENUTZUNG



SCHNELLE BEHANDLUNG



ANGENEHM FÜR ALLE HAUTTYPEN

Venus Epileve™ ist ein kosteneffizientes Lasergerät zur Haarentfernung, mit dem Sie Ihren Umsatz im Bereich der Schönheitseingriffe steigern können. Seine einzigartigen technischen Merkmale machen es zu einem der benutzerfreundlichsten Lasergeräte zur Haarentfernung. Die Behandlungen sind äußerst angenehm, schnell und bei allen Hauttypen enorm effizient.



KOSTENEFFIZIENT

Mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, günstigen Preisen, einer umfassenden Garantie, IoT-Integration und der Vermeidung von Abfällen steigert Venus Concept Ihren Umsatz.



ÄUSSERST EINFACH ANWENDBAR

Die Wahlmöglichkeit zwischen einem Apparat mit Fußschaltung und einem ergonomischen Gerät steigert die Funktionalität und verringert die Müdigkeit des Betreibers. Die beiden Betriebsmodi SLIDE und PULSE, ein System zur Audiounterweisung bei der Gerätebewegung und voreingestellte Behandlungsparameter sorgen für mehr Vielseitigkeit und eine leichtere Bedienbarkeit.



SCHNELLE BEHANDLUNGEN

Eine Wiederholfrequenz von bis zu 10 Hz und die Betriebsmodi SLIDE und PULSE ermöglichen eine schnellere Behandlung und somit einen höheren Patientendurchlauf.




ANGENEHM FÜR ALLE HAUTTYPEN

Sicher für alle Hauttypen, einschließlich gebräunter Haut. Ein fortschrittliches Echtzeitkühlungssystem und der SLIDE-Modus machen die Behandlung für den Patienten angenehm.

SO FUNKTIONIERT ES

Venus Epileve™ nutzt eine Wellenlänge von 800 nm und sorgt somit für die optimale Balance zwischen der Energieabsorption der Melaninchromophore, der geringen Absorption durch Oxyhämoglobin und einer tiefen Hautpenetration. Das Gerät ist für alle Hauttypen, darunter auch gebräunte Haut, sicher. Die hohe Energiedicht von bis zu 40 J/cm² und eine Spitzenleistung von 1600 W bieten einen weiteren Beitrag zur Effizienz des Haarentfernungsgeräts Venus Epileve™.

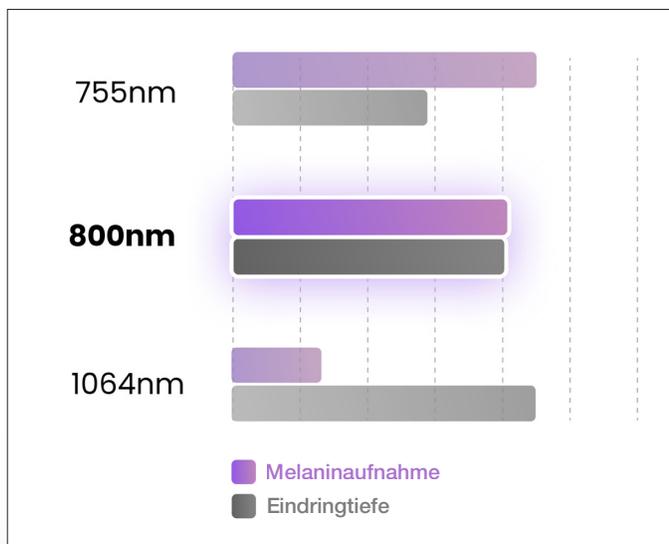

	755nm	800nm	1064nm
Tiefe Penetration		✓	✓
Gut von Melanin aufgenommen	✓	✓	
Angenehm for alle Hauttypen		✓	✓

Quelle: Ross, E. Victor, und al. "Theoretische Überlegungen zur Laser-Haarentfernung". dermatologische Kliniken 17.2 (1999): 333-355.



WARUM ES DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR SIE IST

Einfache Anwendung


Bedienung mit Fußschaltung oder einem ergonomischen Gerät. Das Gerät kann von Rechts- und Linkshändern bequem und für eine lange Nutzungsdauer bei geringem Risiko für RSI-Verletzungen oder Ermüdung bedient werden. Voreingestellte Parameter und eine Audioanleitung zeigen Ihnen während der Behandlung die notwendigen Bewegungen und machen somit die Ergebnisse besser planbarer und einheitlicher. Venus Epileve™ ist ein äußerst mobiles und effizientes Tischgerät, das sich problemlos mit einem herkömmlichen Trolley transportieren lässt.



Schnelle und angenehme Behandlungen


Venus Epileve™ verfügt über zwei unterschiedliche Betriebsmodi: PULSE und SLIDE. Der PULSE-Modus versorgt das Gewebe mit hoher klinischer Effizienz mit mehr Energie bei geringerer Wiederholfrequenz, wodurch weniger Behandlungen erforderlich sind. SLIDE liefert kurze Impulse mit hoher Wiederholfrequenz. Durch die stetige und regelmäßige Bewegung des Geräts über den Behandlungsbereich entsteht eine hohe Durchschnittsstärke. Das sorgt für eine hohe Versorgungsabdeckung und eine nahezu schmerzfreie Behandlung.

Unser innovatives Echtzeitkühlsystem überwacht kontinuierlich die Gerätetemperatur und bietet dem Patienten ein unvergleichliches Maß an Sicherheit und Wohlbefinden. Dank der Kontaktkühlung bleibt die Temperatur während der gesamten Behandlung konstant. Das macht die Behandlung für den Patienten angenehm und steigert dessen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Nachfrage. Die Tatsache, dass durch die Kühlung keine Ausfallzeit entsteht, steigert die Produktivität Ihrer Klinik.

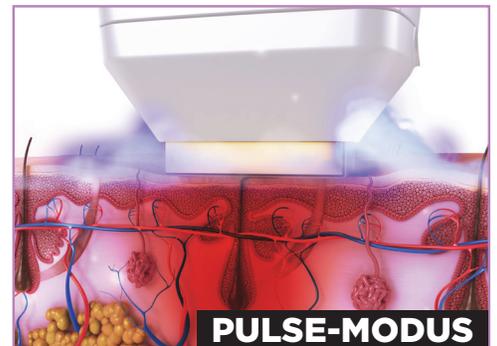

IoT-Technologie

Das Internet der Dinge (IoT) ist die neueste Technologie zur Steigerung der Geschäftsmöglichkeiten. Es hilft bei der Optimierung des gesamten Prozesses, von den Behandlungsprotokollen bis hin zu Ergebnissen und Patientenzufriedenheit. Die IoT-Technologie bietet Informationen zur Maximierung der Behandlungseffizienz und somit auch des Ertrags. Außerdem sorgt sie für einen Gerätebetrieb bei optimaler Leistung.

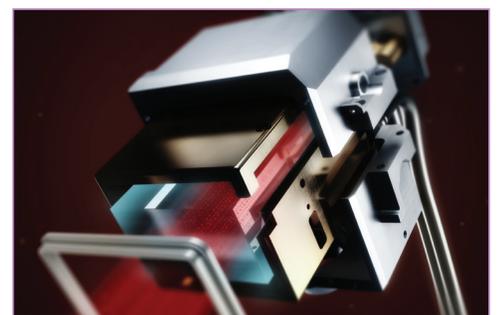

INNOVATION. KOOPERATION. ERFOLG.

MIT EINEM EINZIGARTIGEN GESCHÄFTSMODELL DAS VERSPRECHEN ERFÜLLEN.

Wenn Sie sich für Venus Epileve™ entscheiden, entscheiden Sie sich auch für die Kooperation mit Venus Concept und profitieren von den Vorteilen unseres einzigartigen Geschäftskonzepts:

