

VENUS GLOW



mit Seren

THE POWER OF NATURE

Die Kraft der Natur durch fortschrittliche Technologie

- ✓ AUF SIE ABGESTIMMTE BEHANDLUNGEN MIT AUFHELLENDE SEREN
- ✓ BENUTZERFREUNDLICH UND ANPASSBAR
- ✓ EINE PROFITABLE LÖSUNG
- ✓ SOFORTIGE UND SICHTBARE ERGEBNISSE



Die Venus Glow™-Serumbehandlung kombiniert die Kraft der Natur mit fortschrittlicher Technologie, und liefert dadurch ästhetisch perfekte Ergebnisse zu erschwinglichen Preisen. Das Drei-Phasen-Modell beinhaltet ein einstellbares Vakuumsystem, einen um 360 Grad rotierenden Stift und zwei kräftige und dennoch sanfte Jetstreams für die aufhellenden Seren, die die Poren öffnen und in der Tiefe reinigen, und so den Teint aufhellen. Die Venus Glow™-Behandlung kann einzeln oder in Kombination mit anderen Schönheitsbehandlungen vorgenommen werden.

✓ AUF SIE ABGESTIMMTE BEHANDLUNGEN MIT AUFHELLENDE SEREN

Es gibt zahlreiche unterschiedliche aufhellende Seren, um verschiedenste Hauttypen und -probleme zu behandeln. Dabei garantieren die zwei verschiedenen Behandlungsschritte eine einwandfreie Porenreinigung und Gesichtserneuerung*.

✓ BENUTZERFREUNDLICH UND ANPASSBAR

Die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten bei Drehstift, Ansaugsystem und Jetstreams erlauben es dem Schönheitschirurgen, die Behandlung an die individuelle Hautbeschaffenheit des Patienten anzupassen.

✓ SOFORTIGE UND SICHTBARE ERGEBNISSE

Die Haut fühlt sich mit jeder Behandlung gesünder, reiner und feuchter an.

✓ FÜR DEN PATIENTEN ENTSPANNEND

Eine angenehme Behandlung, bei der der Patient schon nach kurzer Zeit mit einem strahlenden Gesicht zu seiner Alltagsroutine zurückkehren kann.

✓ EINE PROFITABLE LÖSUNG

Dank der niedrigen Betriebskosten und des einzigartigen Geschäftsmodells von Venus Concept ist Venus Glow™ eine absolut rentable Investition. Die Venus Glow™-Behandlung kann allein oder in Kombination mit anderen Schönheitsbehandlungen erfolgen.

*Bei einer Hauterneuerung werden die Poren durch die Entfernung von Unreinheiten wie sich im Alltag ansammelnden Schmutzpartikeln, trockenen oder abgestorbenen Hautzellen und Talgablagerungen, die die Poren verstopfen und zur Bildung von Mitessern (Blackheads und Whiteheads) führen können, geöffnet und in der Tiefe gereinigt.




VENUS GLOW MACHT DEN UNTERSCHIED

Die Venus Glow™-Serumbehandlung nutzt mit ihren wunderbaren Seren die Kraft der Natur und setzt gleichzeitig auf fortschrittliche Technologie, um den Patienten eine unvergleichliche Porenreinigung und Hauterneuerung zu bieten*. Venus Glow™ besteht aus einem leichten Gerät zur Hauterneuerung mit drei Komponenten – einem einstellbaren Vakuumsystem, einem um 360 Grad rotierender Stift und zwei starken und dennoch besonders feinen Jetstreams, die die aufhellenden Seren auf die Patientenhaut auftragen.

VAKUUMSYSTEM UND 360-GRAD-ROTATIONSSTIFT

Das Vakuumsystem saugt die Haut leicht an und öffnet die Poren, indem es Unreinheiten von der Hornhaut entfernt. Während die Haut angesaugt ist, rotiert der Stift um 360 Grad, um das von den feinen Jetstreams abgegebene aufhellende Serum auf der Haut zu verteilen. Das Vakuum steigert die lokale Mikrozirkulation, während der sich drehende Stift sanft die Haut massiert, damit sich die vom Blutkreislauf freigegebenen Nährstoffe besser verteilen.

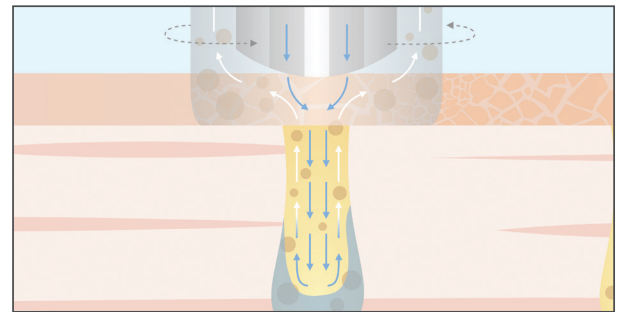

ZWEI STARKE JETSTREAMS FÜR DIE AUFHELLENDE SEREN

Jeder Jetstream ist feiner als eine Haarsträhne. Sie messen gerade einmal 70 Mikromillimeter und sind damit feiner als eine durchschnittliche Pore. Somit können sie das aufhellende Serum tief in die Poren spritzen, wo es besonders gut aufgenommen wird.



VENUS GLOW

mit Seren

PRÄSENTATION GLOWSERUMS

ZÖGERN SIE NICHT LÄNGER

Entdecken Sie die Vorteile unserer fortschrittlichen aufhellenden Seren aus ökologischen und zertifizierten Bio-Pflanzenstoffen, Antioxidationsmitteln und aktiven Peptiden, die durch eine tiefgehende Porenreinigung verschiedenste Hautprobleme beseitigen können. Die aufhellenden Seren sind stark und dennoch hautschonend sowie frei von Parabenen, Farbstoffen und Aromen und daher ideal für verschiedene Hautfarben und -typen sowie für empfindliche Haut.



REINIGUNG/VORBEREITUNG

Entfernen Sie alle Spuren von Make-up oder Creme vom Gesicht und beginnen Sie die Behandlung mit destilliertem Wasser.

WÄHLEN SIE IHR AUFHELLENDES SERUM



GLOWASTRA | FÜR STRAHLENDERE HAUT

Hautaufhellendes Antioxidationsserum aus natürlichen Pflanzenextrakten und stärkendem Vitamin C zur Aufhellung und Bewahrung von Teint, Hautbeschaffenheit und -glanz.



GLOWSANA | ZUM SCHUTZ DER HAUT

Die Haut schützendes Serum reich an Antioxidationsstoffen wie leistungsstarken Pflanzenextrakten, die das Altern der Haut verlangsamen und sie vor Schäden durch freie Radikale schützen. Schützt die Haut und verleiht ihr mehr Stärke und Elastizität.



GLOWNOVA | FÜR JUGENDLICHE HAUT

Anti-aging-Serum mit Aminosäure-Peptiden, das feine Linien und Falten reduziert. Peptide verbessern Beschaffenheit, Stärke und Elastizität der Haut. Pflanzenextrakte entgiften und fördern die Kollagenproduktion



GLOWCLARA | FÜR REINE HAUT

Entspannendes und beruhigendes Serum zur Reduzierung von Rötungen und Entzündungen. Peptide bekämpfen Hautreizungen und Rötungen. Pflanzenextrakte mit Antioxidationsseigenschaften verbessern den Heilungsprozess der Haut.

Ausschließlich zur externen Verwendung. Ausschließlich für den professionellen Gebrauch. Konzentriertes Mittel. Muss umgehend gemäß den Anweisungen aufgelöst und verwendet werden. In den USA und aus in den USA hergestellten und importierten Materialien gefertigt für Venus Concept Inc.
1880 N Commerce Pkwy, Ste 2 Weston, FL 33326. VenusConcept.com



REINIGUNG/VORBEREITUNG

BEHANDLUNGSSEREN



GLOWASTRA | FÜR STRAHLENDE HAUT

Aqua / Wasser, Magnesiumascorbylphosphat, Natriumhyaluronat, Pentylenglykol, Panthenol, Caprylylglykol, Hexylenglykol, Phenoxyethanol.



GLOWSANA | FÜR GESCHÜTZTE HAUT

Aqua / Wasser, Zitronensäure, Pentylenglykol, Leontopodium-Alpinum-Meristem-Zellkultur, Malus Domestica Fruchtzellkulturextrakt, Cyclotetrapeptid-24 Aminocyclohexan Carboxylat, Aloe Barbadensis-Blattextrakt, Xanthangummi, Ammoniumacryloyldimethyltaurat / VP Copolymer, Ectoin, Lecithin, Glycerin, Natriummetabisulfit, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Caprylylglykol, Hexylenglykol, Alkohol, Phenoxyethanol, Tetranatrium EDTA, Natriumhydroxid.



GLOWNOVA | FÜR JUGENDLICHE HAUT

Aqua / Wasser, Aminopropylascorbylphosphat, Pentylenglykol, Acacia Senegal Gum, Natriumhyaluronat, Trifluoracetyltri-peptid-2, Alanin, Glycin, Lysinhydrochlorid, Proline, Valin, Crocus Chrysanthus Zwiebelextrakt, Glycerin, Osmanthus Fragrans Blume Extrakt, Dextran, Hexylenglykol, Propandiol, Natriummetabisulfit, Caprylylglykol, Tetranatrium-EDTA, Phenoxyethanol, Natriumhydroxid.



GLOWCLARA | FÜR REINE HAUT

Aqua / Wasser, Sorbit, Panthenol, Pentylenglykol, Natriumhyaluronat, Acetylen Tetrapeptid-40, Vitis Vinifera (Trauben) Samenextrakt, Camellia Sinensis (Grüner Tee) Blatt Extrakt, Chrysanthellum Indicum Extrakt, Lecithin, Ascophyllum Nodosum (Algen) Extrakt, Althaea Officinalis (Marshmallow) Wurzelextrakt, Ilex Paraguariensis Blatt (Mate) Extrakt, Paullinia Cupana (Guarana) Fruchtextrakt, Avena Sativa (Hafer) Kernextrakt, Zingiber Officinale (Ingwer) Wurzelextrakt, Kaliumsorbat, Alteromonas Ferment Extrakt, Cola Nitidia (Kola) Samenextrakt, Asparagopsis Armata Extrakt, Beta Glucan, Glycerin, Butylenglykol, Natriumbenzoat, Natriummetabisulfit, Magnolia Officinalis Rindenextrakt, Tocopherol, Caprylylglykol, Hexylenglykol, Maltodextrin, Phenoxyethanol, Tetranatrium-EDTA.

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Strom	100~240 V, 50~60 Hz / 90 W
Durchlass	70 um
Durchmesser Stiftspitze	2,5 mm
Stiftrotationsgeschwindigkeit	3 Level
Jet (Injektion) Level	3 Level
Vakuumlevel	3 Level
Display	7" TFT LCD, Touch Screen
Maße (Breite x Länge x Höhe):	Hauptgerät: 32 cm x 36 cm x 32 cm / 12,6 in x 14,2 in x 12,6 in Carro: 48 cm x 44 cm x 91 cm / 18.9 in x 17.3 in / 35.8 in
Gewicht	Hauptgerät: 7 kg/ 15,4 lb Carro: 16.5 kg/ 36.3 lb



Deutschland büro: Boulevard der EU 7 30539, Hannover. Germany
Phone: 49 160 99757413
Email: info.de@venusconcept.com

Tel: 888-907-0115

Besuchen Sie uns unter venusconcept.com

