



  
**VENUS ÉPILEVÉ**

UNE SOLUTION  
COMPACTE ET  
RENTABLE POUR  
L'ÉPILATION



 RENTABLE

 FACILE À UTILISER

 TRAITEMENTS RAPIDES

 CONFORTABLE POUR TOUS LES TYPES DE PEAUX

Venus Epileve™ est l'appareil laser dont la rentabilité générera un ROI positif pour les cabinets d'esthétique qui proposent l'épilation. Ses caractéristiques technologiques uniques en font l'un des appareils lasers d'épilation les plus faciles à utiliser de toute l'industrie. Les traitements sont très confortables, rapides, et extrêmement efficaces pour tous les types de peaux.



## RENTABLE

Le modèle commercial unique de Venus Concept, ses prix compétitifs, sa garantie intégrale, son intégration IdO, et la non-utilisation de consommables garantissent un retour sur investissement plus grand.



## FACILE À UTILISER

Choisissez entre une pédale de commande et un applicateur ergonomique pour une fonctionnalité supérieure et une fatigue d'opération réduite. Deux modes d'opération (SLIDE et PULSE), un système de guidage auditif qui accompagne le mouvement de l'applicateur et des paramètres prédéfinis offrent une grande versatilité et une facilité d'utilisation accrue pour l'opérateur.



## TRAITEMENTS RAPIDES

Un taux de répétition qui peut atteindre les 10 Hz, et les modes SLIDE et PULSE en option offrent une rapidité de traitement qui permet d'accepter un plus grand nombre de patients.




## CONFORTABLE POUR TOUS LES TYPES DE PEAU

Sûr pour tous les types de peaux, y compris les peaux bronzées. Un système de refroidissement instantané de pointe et le mode SLIDE procurent un grand confort pour les patients.

## FONCTIONNEMENT

Avec une fréquence de 800 nm, Venus Epileve™ propose l'équilibre parfait entre une haute d'absorption d'énergie des chromophores de mélanine, peu d'absorption de l'oxyhémoglobine, et une bonne pénétration dans la peau, ce qui le rend sûr et efficace pour tous les types de peaux, y compris les peaux bronzées. Sa grande densité énergétique allant jusqu'à 40 J/cm<sup>2</sup> et sa puissance maximale de 1600 W contribuent aussi à faire de Venus Epileve™ un système d'épilation hautement efficace.

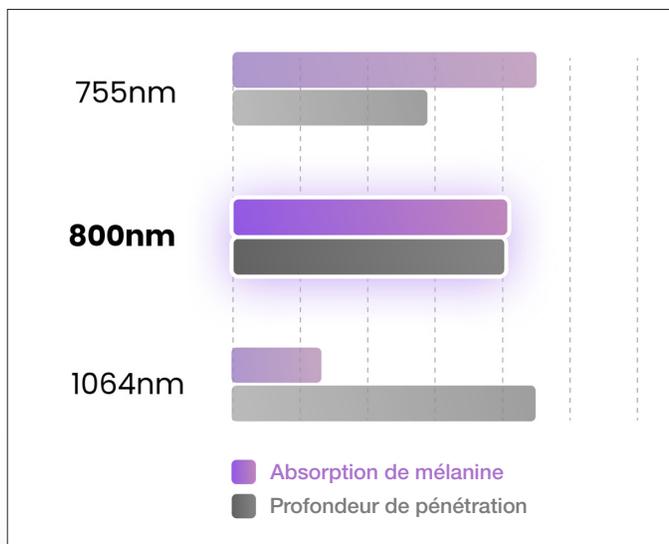

	755nm	800nm	1064nm
Pénétration profonde		✓	✓
Bien absorbé par la mélanine	✓	✓	
Confortable pour tous les types de peau		✓	✓

Source: Ross, E. Victor, et al. "Considérations théoriques sur l'épilation au laser". Clinique Dermatologique 17.2 (1999): 333-355.



## LES BÉNÉFICES POUR VOTRE CABINET


### FACILE À UTILISER

Utilisez une pédale de commande ou un applicateur ergonomique, à votre convenance. L'applicateur est conçu de telle façon que l'opérateur, qu'il soit droitier ou gaucher, puisse le manipuler confortablement durant de longues heures avec un risque minime de microtraumatismes répétés ou de fatigue de l'utilisateur. La combinaison de paramètres préétablis et du système de guidage auditif, qui standardise la prestation en vous signalant le moment de faire le mouvement, mène à des résultats plus prévisibles et cohérents. De plus, le Venus Epileve™ est un appareil portable, ce qui le rend facile à déplacer sur un chariot standard pour plus de mobilité.



### DES TRAITEMENTS RAPIDES ET CONFORTABLES

Venus Epileve™ offre deux modes d'opération différents : Les modes PULSE et SLIDE. Le mode PULSE transmet une énergie intense au tissu à un taux de répétition moindre, ce qui amène une efficacité clinique plus grande et moins de séances de traitement. Le mode SLIDE apporte un taux élevé de répétition d'impulsions courtes, ce qui aboutit à une puissance moyenne élevée tandis que l'opérateur fait glisser l'applicateur doucement et de façon continue sur la zone à traiter. C'est la garantie d'un traitement complet pratiquement sans douleur pour le patient. Notre système novateur de refroidissement instantané surveille la température de l'applicateur fréquemment pour une sécurité et un confort du patient incomparables. Avec le refroidissement de contact, la température est maintenue tout au long de la durée de la séance pour procurer une expérience de traitement confortable, ce qui augmentera d'autant l'adhésion, la satisfaction et la demande du client. En même temps, l'absence de temps de récupération pour faire baisser la température se traduit en productivité accrue pour votre clinique.

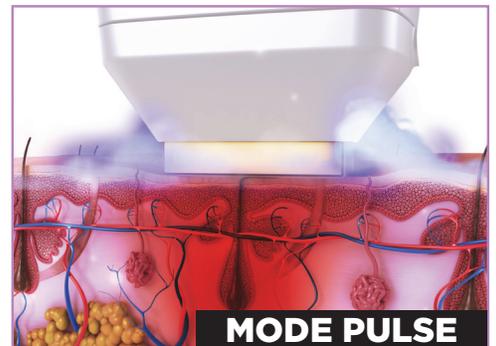

### TECHNOLOGIE IDO


L'Internet des Objets (IdO) est la technologie de pointe qui optimise les opérations commerciales. Il contribue à parfaire tous les aspects, des protocoles de traitement aux résultats et à la satisfaction des patients. L'IdO procure des informations afin de maximiser l'efficacité du traitement pour un ROI optimal. Cela garantit également que notre appareil fonctionne au maximum de sa performance.



# INNOVATION PARTENARIAT SUCCÈS

## TENIR SES PROMESSES AVEC UN MODÈLE COMMERCIAL UNIQUE

Choisir Venus Epileve™, c'est devenir partenaire de Venus Concept  
et profiter des bénéfices de notre modèle commercial unique dans l'industrie, qui comprend:

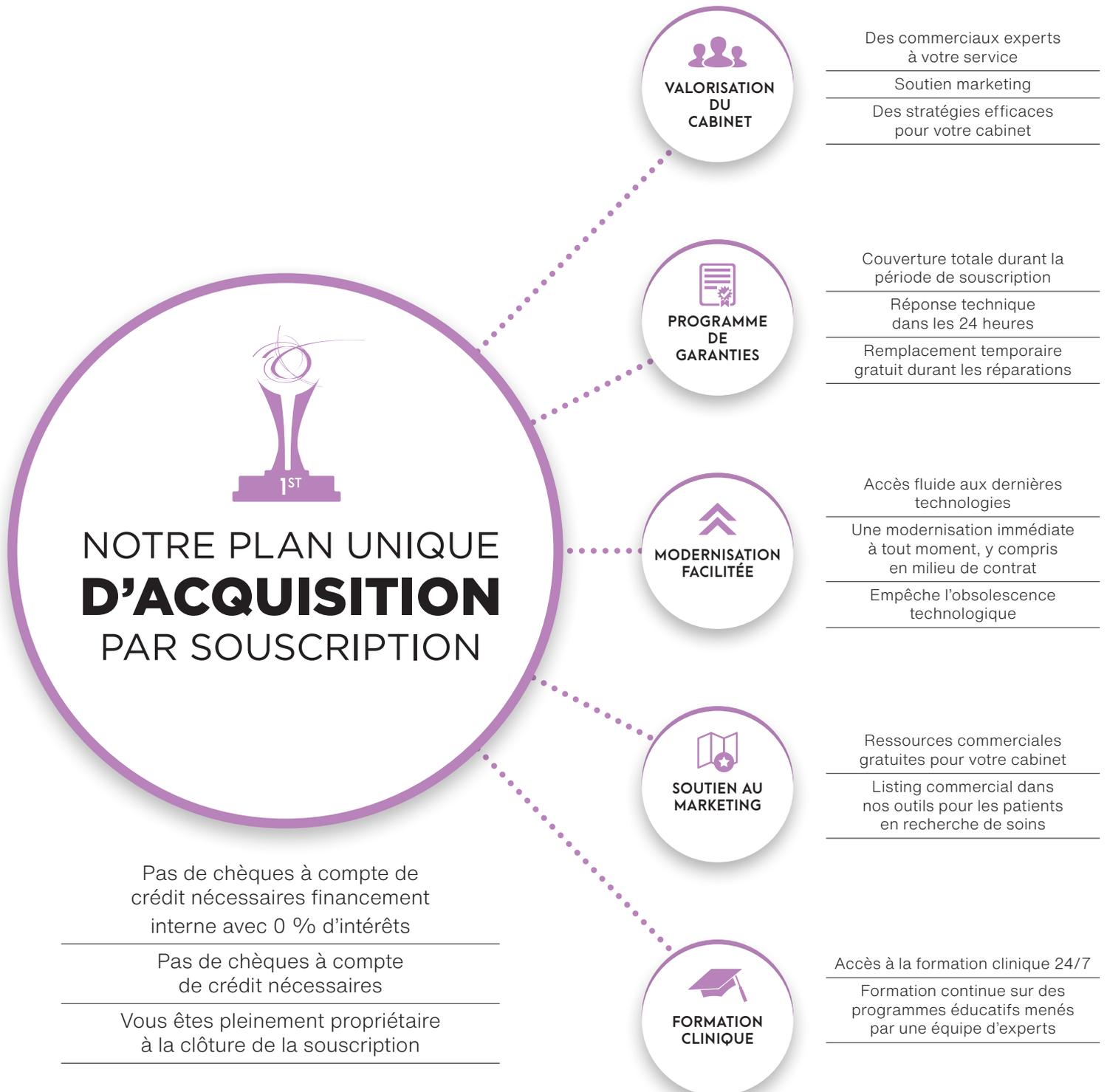

# CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	100 - 240 VAC, moins de 12A, 50-60 Hz, Monophasé
Fréquence	800 nm
Puissance maximale du laser	1600 W
Taille du faisceau	2 cm <sup>2</sup> (16.5 mm x 12 mm)
Amplitude de la fluence	Jusqu'à 40J/cm <sup>2</sup>
Taux de répétition de la pulsation	Jusqu'à 10 Hz
Durée de pulsation	Jusqu'à 170 ms
Dimensions	43 cm x 54 cm x 34 cm / 16.9 in x 21.3 in x 13.4 in (L x P x H)
Poids	Sans applicateur: 19 Kg / 42 Lb Applicateur exclusivement: 1,5 Kg / 3.3 Lb



**Siège social:** Venus Concept France Le Carré Haussmann Evry 52 Boulevard de l'Yerres 91000 Every-Courcouronnes. Francia.

**Tel: 33.1.81.14.29.40** **Visite [venusconcept.com](http://venusconcept.com)**



\*Venus Epileve™ est agréé par Santé Canada pour l'épilation, la réduction définitive de pilosité (définie comme la réduction stable à long terme du nombre de poils qui repoussent quand ils sont mesurés à 6, 9 et 12 mois après la fin du traitement), et le traitement de la pseudo-folliculite de la barbe pour tous les phototypes de peau.