

VENUS GLOW



avec Sérums

THE POWER OF NATURE

par le biais d'une technologie de pointe



DES TRAITEMENTS SUR-MESURE AVEC NOS SÉRUMS RÉGÉNÉRANTS



FACILES À UTILISER ET PERSONNALISABLES



UNE SOLUTION RENTABLE



DES RÉSULTATS VISIBLES ET INSTANTANÉS



Venus Glow™, avec ses sérums, conjugue les pouvoirs de la nature avec une technologie de pointe pour des résultats performants. Il s'appuie sur un traitement efficace à trois modalités sous la forme d'une aspiration réglable, d'une pointe rotative à 360°, et de deux jets puissants et ultra-fins dispensant les sérums de votre choix qui, simultanément, ouvrent, nettoient et traitent en profondeur les pores pour une peau lumineuse. Le traitement Venus Glow™ peut être appliqué seul ou en complément d'autres traitements esthétiques.



TRAITEMENTS SUR MESURE AVEC DES SÉRUMS DE RAJEUNISSEMENT

Les sérums de rajeunissement sont disponibles dans une multitude de formules uniques pour pouvoir traiter une grande diversité de problèmes de peau. Les traitements se présentent sous la forme d'un protocole en deux étapes pour un nettoyage de peau et un rajeunissement du visage* incomparables.



FACILES À UTILISER ET PERSONNALISABLES

Sa pointe rotative réglable, son pouvoir d'aspiration et de jet permettent au technicien d'adapter le traitement de façon à ce qu'il corresponde au problème de peau du patient.



DES RÉSULTATS VISIBLES ET INSTANTANÉS

La peau paraît plus saine, plus propre, et plus hydratée après chaque soin.



UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE POUR LE PATIENT

Un soin confortable pour une peau resplendissante après lequel les patients peuvent retourner à leurs activités sans éviction.



UNE SOLUTION AVANTAGEUSE

Venus Glow™ est un excellent investissement, pérennisé par le faible coût des consommables et le modèle de financement unique de Venus Concept qui optimise le retour sur investissement. Le soin Venus Glow™ est parfait en tant que traitement indépendant ou pour compléter d'autres soins esthétiques.




LA DIFFÉRENCE VENUS GLOW™

Le traitement Venus Glow™ avec les sérums tire parti des pouvoirs de la nature par le biais d'ingrédients sophistiqués et d'une technologie innovante de diffusion de sérum pour procurer aux patients un nettoyage de pores et une régénération dermique incomparables*. Le dispositif Venus Glow™ fonctionne avec une pièce à main légère qui s'appuie sur un système à trois modalités comportant un système d'aspiration réglable, une pointe rotative à 360 degrés, et deux jets puissants qui imprègnent la peau des Glow sérums élaborés spécifiquement.

ASPIRATION ET POINTE ROTATIVE À 360°

La pièce à main aspire doucement sur la peau pour ouvrir les pores en éliminant les impuretés de la couche cornée. Pendant que la peau est tirée vers le haut, la pointe tourne à 360 degrés pour appliquer uniformément le sérum choisi qui est projeté sur la peau en jets fins et puissants. L'aspiration augmente la micro-circulation du sang alors que la pointe rotative effectue des mini massages sur la peau pour favoriser la circulation des nutriments ainsi libérés.

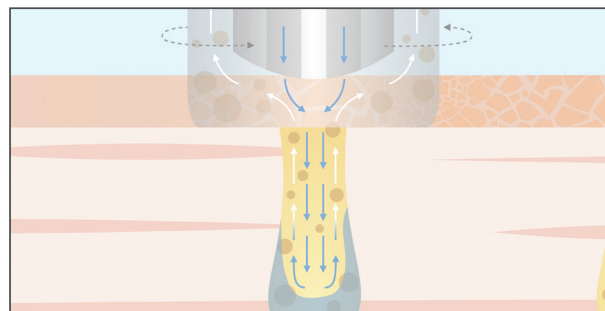

DEUX PUISSANTS JETS QUI APPLIQUENT LES SÉRUMS

Chaque jet est plus fin qu'une mèche de cheveux standard. Il mesure seulement 70 microns, ce qui est plus petit que la taille moyenne d'un pore, permettant aux sérums de pénétrer jusqu'au fond des pores, et favorise l'absorption des nutriments.



*Dermal renewal treatments open up and deep-clean pores by removing impurities such as daily dirt and debris, dry or dead skin cells, and excess sebum, which can clog pores and cause blackheads and whiteheads.

Explorez les bénéfices des ingrédients perfectionnés de nos sérums, y compris de fortes concentrations de plantes certifiées biologiques, respectueuses de l'environnement, d'antioxydants et de peptides actifs qui sont renommés pour leur action nettoyante en profondeur et pour leur traitement d'une variété de problèmes de peau usuels. Les Glow sérums sont puissants mais doux pour la peau, ne contiennent pas de parabens, de colorants ni de parfum, ce qui en fait des sérums de traitement parfaits pour de nombreux types de peau.



COMMENZED PAR

Commenced par un nettoyage Venus Glow™ avec de l'eau purifiée

CHOISISSEZ VOTRE SÉRUM



GLOWASTRA | POUR UNE PEAU PLUS LUMINEUSE

Sérum antioxydant qui éclaircit la peau, aux extraits naturels de plantes et à la vitamine C pour favoriser et maintenir la tonicité, la texture et la luminosité de la peau.



GLOWSANA | POUR UNE PEAU PROTÉGÉE

Sérum de protection pour la peau riche en antioxydants aux puissants extraits de plantes connues pour ralentir le vieillissement de la peau tout en la protégeant des agressions des radicaux libres. Protège, améliore la fermeté et l'élasticité de la peau.



GLOWNOVA | POUR UNE PEAU JEUNE

Sérum anti-âge contenant des peptides amino-acides connus pour réduire l'apparition des ridules et rides. Les peptides favorisent la texture, la force et la résilience de la peau. Bénéfices ajoutés des extraits de plantes connues pour leur effet detox et pour leur contribution à la production de collagène.



GLOWCLARA | POUR UNE PEAU LUMINEUSE

Sérum calmant et apaisant conçu pour réduire les rougeurs et irritations. Contient des peptides pour réduire les imperfections et les rougeurs. Extraits de plantes ajoutés contenant de propriétés antioxydantes connues pour leur effet boostant sur le système de régénération de la peau.

SÉRUMS DE TRAITEMENT



GLOWASTRA | POUR UNE PEAU PLUS LUMINEUSE

Aqua / eau, phosphate ascorbyle de magnésium, hyaluronate de sodium, pentylène glycol, Panthénol, Caprylyl Glycol, Hexylène Glycol, Phénoxyéthanol.



GLOWSANA | POUR UNE PEAU PROTÉGÉE

Aqua / Eau, Acide Citrique, Pentylène Glycol, Culture Cellulaire Leontopodium Alpinum Meristem, Extrait de culture de cellules de fruit de Malus Domestica, cyclotétrapeptide-24 aminocyclohexane Carboxylate, extrait de feuille d'aloë barbadensis, gomme de xanthane, acryloyldiméthyltaurate d'ammonium / Copolymère VP, ectoïne, lécithine, glycérine, métabisulfite de sodium, sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Caprylyl Glycol, Hexylène Glycol, Alcool, Phénoxyéthanol, Tétrasydium EDTA, hydroxyde de sodium.



GLOWNOVA | POUR UNE PEAU JEUNE

Aqua / eau, phosphate d'aminopropyle ascorbyle, pentylène glycol, gomme d'Acacia Sénégal, Hyaluronate de sodium, trifluoroacétyl tripeptide-2, alanine, glycine, chlorhydrate de lysine, Proline, valine, extrait de bulbe de crocus chrysanthé, glycérine, fleur d'Osmanthus Fragrans Extrait, dextrane, hexylène glycol, propanediol, métabisulfite de sodium, caprylyl glycol, EDTA tétrasodique, phénoxyéthanol, hydroxyde de sodium.



GLOWCLARA | POUR UNE PEAU NETTE

Aqua / eau, sorbitol, panthénol, pentylène glycol, hyaluronate de sodium, acétyl Tétrapeptide-40, extrait de pépins de Vitis Vinifera (raisin), feuille de Camellia Sinensis (thé vert) Extrait, extrait de chrysanthellum indicum, lécithine, ascophyllum nodosum (algues) Extrait, extrait de racine d'Althaea Officinalis (guimauve), feuille d'Ilex Paraguariensis (maté) Extrait, extrait de fruit de Paullinia Cupana (guarana), extrait de noyau d'Avena Sativa (avoine), Extrait de racine de Zingiber Officinale (gingembre), sorbate de potassium, ferment d'alteromonas Extrait, extrait de graine de cola nitidia (kola), extrait d'asparagopsis armata, bêta-glucane, Glycérine, butylène glycol, benzoate de sodium, métabisulfite de sodium, magnolia officinalis Extrait d'écorce, tocophérol, caprylyl glycol, hexylène glycol, maltodextrine, phénoxyéthanol, Tetrasodium EDTA.

SPÉCIFICATIONS DU DISPOSITIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	100~240 V, 50~60 Hz / 90 W
Diamètre des jets	70 µm
Diamètre de l'embout	2.5 µm
Niveaux de rotation de l'embout	3 Niveaux
Niveaux d'injection	3 Niveaux
Niveaux d'aspiration	3 Niveaux
Affichage	Écran tactile LCD TFT 7po
Dimensions (L x D x H)	Appareil principal : 32 cm x 36 cm x 32 cm / 12,6 po x 14,2 po x 12,6 po
	Chariot : 48 cm x 44 cm x 91 cm / 18,9 po x 17,3 po x 35,8 po
Poids	Appareil principal : 7 kg / 15,4 lb
	Chariot : 16,5 kg / 36,3 lb



**Siège social : 255 Consumers Road, Suite 110,
Toronto (Ontario) M2J 1R4**

**Bureau France : 52 Boulevard de l'Yerres, 91000
Évry-Courcouronnes**

Tel: +33 1 81 14 29 40

Visitez-nous à venusconcept.com

