



LA SOLUTION NOVATRICE
POUR TRAITER LES
PROBLÈMES ESTHÉTIQUES
EXIGEANTS



DES FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ PERFECTIONNÉES



FACILE À UTILISER



UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT PLUS INTÉRESSANT



UNE TECHNOLOGIE SANS DANGER POUR TOUS LES
TYPES DE PEAU

Ce dispositif médical non-invasif extrêmement sophistiqué est une réponse efficace à vos besoins en esthétique du visage et du corps, comme la réduction du tour de taille sans chirurgie*, la réduction de la cellulite*, le raffermissement de la peau*, et la réduction des rides*. Ces traitements sont confortables sans temps de récupération et la technologie employée est sans danger pour tous les types de peau. Venus Legacy™ s'appuie sur une technologie (MP)² exclusive assortie de la technologie de pointe VariPulse™, qui favorise les effets de lipolyse de la radiofréquence, stimule temporairement la circulation sanguine et stimule le drainage lymphatique.¹



DES SOINS NON-INVASIFS POUR RÉPONDRE à DES BESOINS D'ESTHÉTIQUE EXIGEANTS

Venus Legacy™ amincit le corps*, réduit la cellulite et les rides, et raffermi la peau relâchée* du visage et du corps.



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR DES RÉSULTATS VISIBLES

La technologie de pointe VariPulse™ offre une aspiration et un retour d'informations thermiques en temps réel pour garantir un confort optimal pour le patient avec des résultats remarquables.




CONFORTABLE, SANS TEMPS DE RÉCUPÉRATION ET SANS DANGER POUR TOUS LES TYPES DE PEAU

La radiofréquence est reconnue pour être sans danger pour tous les types de peau.² Les soins sont confortables sans temps de récupération.



UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT PLUS INTÉRESSANT

Le modèle commercial unique de Venus Concept garantit un risque moindre et des retours sur investissement plus grands à la participation.

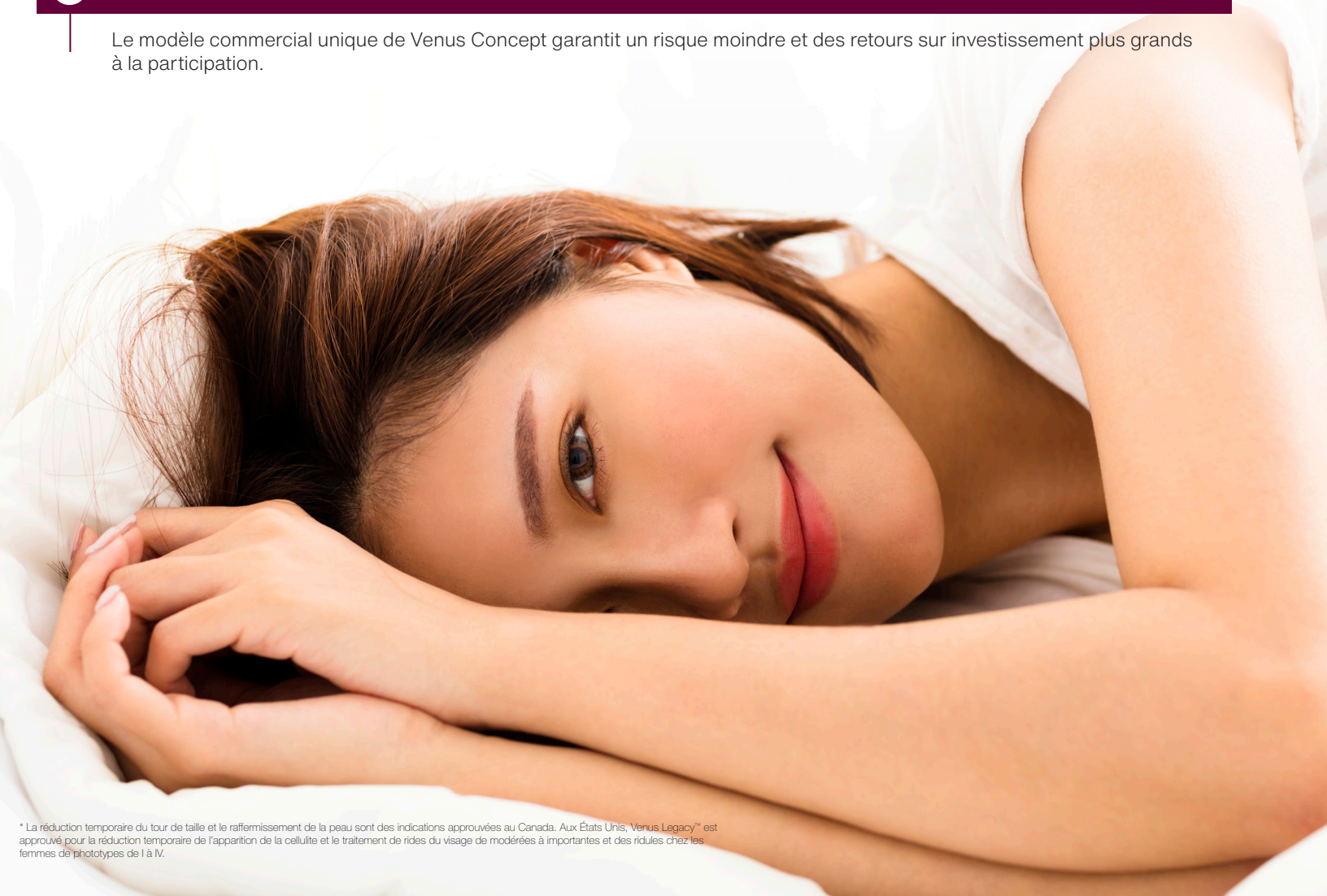



LA TECHNOLOGIE (MP)²

Venus Legacy™ s'appuie sur une technologie (MP)² unique dans l'industrie, la combinaison synergétique de la radiofréquence (RF) multipolaire et des champs électromagnétiques pulsés (PEMF).

LES RADIOFRÉQUENCES MULTIPOLAIRES

La radiofréquence (RF) multipolaire s'appuie sur un algorithme unique pour transmettre une chaleur plus homogène à travers des tissus multiples, ce qui permet une accumulation de chaleur plus rapide et facilite le maintien en température thérapeutique. Cela favorise l'efficacité et la sécurité du patient. Avec le réchauffement homogène, nul besoin d'agents de refroidissement et d'après les patients cela contribue à faire des soins une expérience agréable.



LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES PULSÉS


Les effets de la radiofréquence multipolaire sont augmentés par les champs électromagnétiques pulsés (PEMF), une technologie non-thermique diffusée par le biais des électrodes de l'applicateur.

Les PEMF ont été reconnus efficaces dans le déclenchement du processus de régénération dans la peau³ et sont utilisés dans la médecine conventionnelle depuis des décennies.



L'EFFET SYNERGÉTIQUE DE LA RF MULTIPOLAIRE ET DES PEMF

Les (MP)² augmentent synergiquement la production de collagène par le biais de deux mécanismes. La radiofréquence multipolaire (thermiques) et les PEMF (non thermiques). Les radiofréquences stimulent les fibroblastes tandis que les PEMF entraînent la prolifération de fibroblastes par le biais de l'émission du facteur de croissance FGF-2.4 Ensemble, ils s'activent pour augmenter la synthèse du collagène. (MP)² est approuvé et efficace pour le remodelage du collagène en vue du raffermissement de la peau et de la création de nouveau capillaires, ce qui renouvelle l'irrigation sanguine.

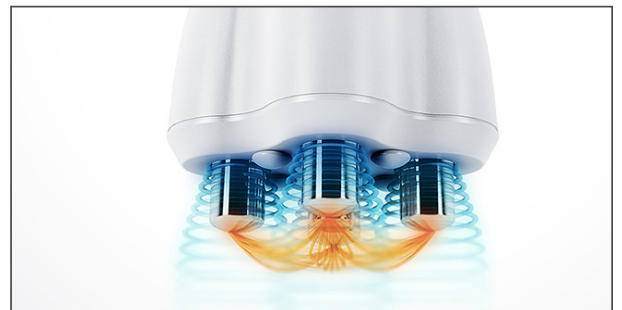



APPLICATEURS

Venus Legacy™ comprend quatre applicateurs : OctiPolar™ et le 4D corporel pour des zones plus étendues, et le DiamondPolar™ et le 4D facial pour les zones plus petites. Ces quatre applicateurs légers, à la conception ergonomique, s'appuient sur la technologie propriétaire (MP)2. Les applicateurs OctiPolar™ et DiamondPolar™ sont plus adaptés pour le raffermissement* de la peau et la réduction des rides*. Les applicateurs 4D pour le corps et pour le visage sont équipés de la nouvelle technologie VariPulse™, ce qui les rend efficaces pour la réduction du tour de taille* et de la cellulite*.

LES APPLICATEURS DIAMONDPOLAR™ & OCTIPOLAR™



DIAMONDPOLAR™



OCTIPOLAR™

APPLICATEUR CORPOREL 4D

L'applicateur corporel 4D est conçu avec une matrice énergétique de RF et de PEMF multidimensionnelle qui peut cibler des zones de traitement spécifiques depuis de multiples directions et positions pour diminuer efficacement les cellules graisseuses et entraîner la réduction de la cellulite. Il est doté d'un design innovant de couronne à deux électrodes multipolaires dans lesquelles la couronne externe plate contrôle le chauffage volumétrique électrothermique tandis que la couronne interne profonde tétrapolaire permet un réchauffement électro-thermal sélectif intermittent assisté par aspirateur. Unique en son genre, ce réseau de huit électrodes espacées de 7,5cm maximum offre une zone de traitement qui permet des soins plus rapides. Cette distance, associée à la technologie VariPulse™, offre une profondeur de pénétration importante allant jusqu'à 4,5cm pour des effets plus substantiels sur les amas graisseux, avec d'excellents résultats.



APPLICATEUR FACIAL 4D

L'applicateur facial 4D possède toutes les fonctionnalités technologiques et bénéfices uniques de l'applicateur corporel 4D, mais dans une configuration plus petite. Il est conçu pour traiter des zones corporelles plus petites et permet aux opérateurs d'accéder aisément aux zones difficiles à atteindre comme celles qui entourent les pommettes et le cou.





COMMENT ÇA FONCTIONNE



DES TECHNOLOGIES DE POINTE


LA TECHNOLOGIE VARIPULSE™

Venus Legacy™ s'appuie sur la technologie propriétaire de pointe VariPulse™. Elle est intégrée dans les applicateurs 4D pour le corps et le visage. VariPulse™ consiste en une succion réglable qui facilite la pénétration énergétique en profondeur. Cet appareil favorise la pénétration et les effets de l'énergie de la RF en améliorant la surface de contact entre les électrodes et les tissus, améliorant ainsi le couplage de la RF et la transmission de la chaleur. VariPulse™ a également pour effet d'améliorer temporairement la circulation au niveau local. La technologie VariPulse™ permet à Venus Legacy™ de répondre efficacement aux problèmes d'esthétique les plus exigeants comme les amas graisseux et la cellulite. Avec l'aspiration de VariPulse™, l'opérateur peut atteindre une température thérapeutiquement efficace plus vite et la conserver durant toute la séance (particulièrement sur des zones plus étendues du corps), tout en maintenant le confort du soin pour le patient. Cette technologie innovante garantit un confort optimal du patient et donne des résultats tout à fait remarquables.

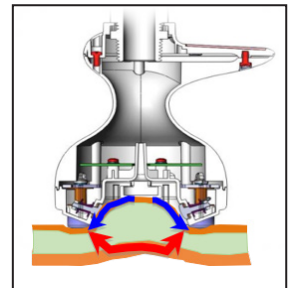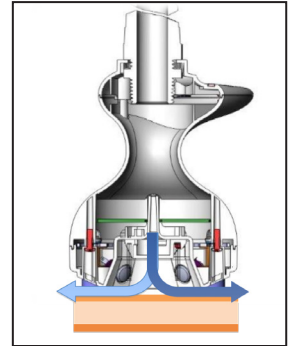

DES INFORMATIONS THERMIQUES EN TEMPS RÉEL

Les quatre applicateurs Venus Legacy™ sont équipés de capteurs qui donnent les informations thermiques en temps réels, ce qui permet de contrôler la courbe de température de la peau facilement, immédiatement et en continu. Cette fonctionnalité fait de Venus Legacy™ un appareil facile à utiliser et donc extrêmement facile à transmettre. La sécurité et le confort du patient sont favorisés ; des résultats cliniques plus cohérents et prévisibles peuvent en découler.

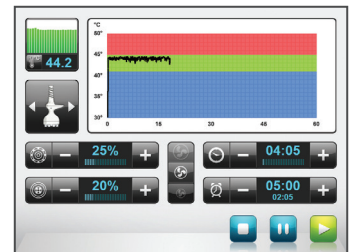

LES RÉSULTATS SONT LÀ



Avec l'aimable autorisation de Synergy Aesthetics and Wellness
Résultats après 10 soins



Avec l'aimable autorisation de Venus Concept
Résultats après 8 soins




Avec l'aimable autorisation de Younger Body MediSpa
Résultats après 5 soins



Avec l'aimable autorisation de Martin Ray, MD
Résultats après 8 soins



Avec l'aimable autorisation de Gitit Zucker, MD
Résultats après 10 soins

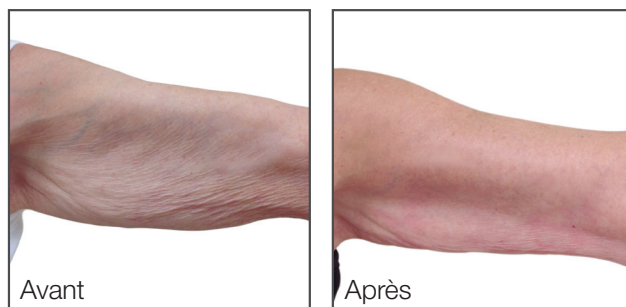


Avec l'aimable autorisation de Beach Grove Laser
Résultats après 5 soins

INNOVATION PARTENARIAT SUCCÈS

Une technologie innovante optimisée par un modèle commercial unique




Choisir Venus Legacy™, c'est devenir partenaire de Venus Concept
et profiter des bénéfices de notre modèle commercial unique dans l'industrie, qui comprend :

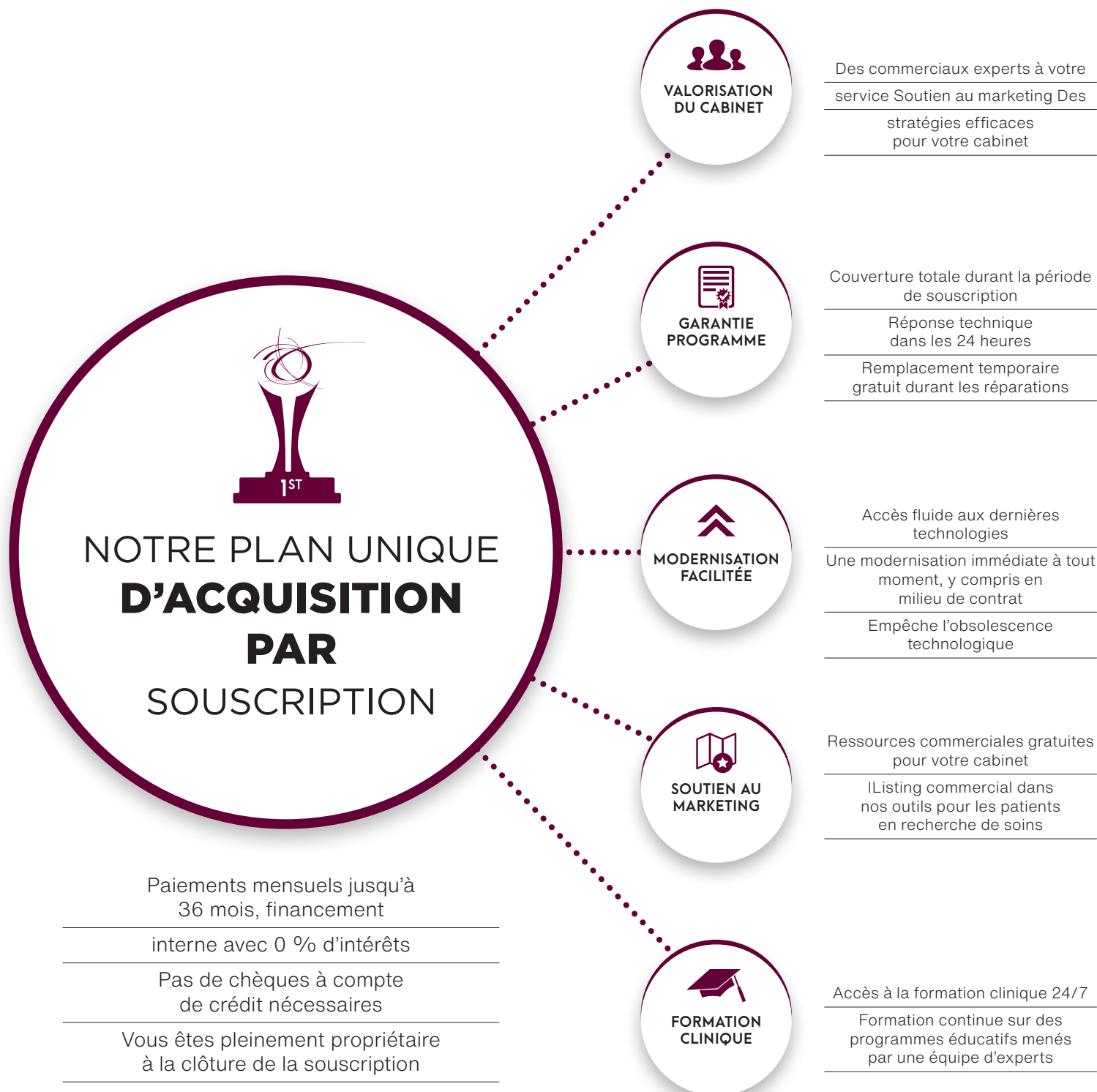

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	100/120/240V~, 670 VA, 50/60 Hz
Fréquence de sortie RF	1 MHz
Fusible	T10A, 250V
Puissance de sortie Max. RF	Jusqu'à 150 Watts
(MP) ² Appareils	DiamondPolar™ Applicateur (LF1) avec thermomètre intégré Applicateur OctiPolar™ (LB1) avec thermomètre intégré 4D Applicateur facial (LF2) avec thermomètre intégré (4 niveaux de succion) 4D Applicateur corporel (LB2) avec thermomètre intégré (4 niveaux de succion)
Tension de sortie	Jusqu'à 130V @ Puissance nominale
Fréquences de champs magnétiques pulsés	15 Hz
Champ magnétique	Jusqu'à 15 gauss
Dimensions	40 cm x 40 cm x 100 cm / 15,75 in x 15,75 in x 39,37 in (P x L x H)
Poids	40 kg / 88,2 lb

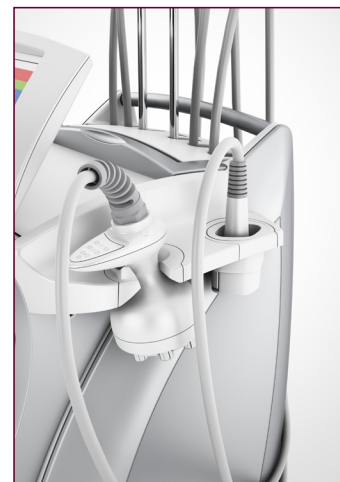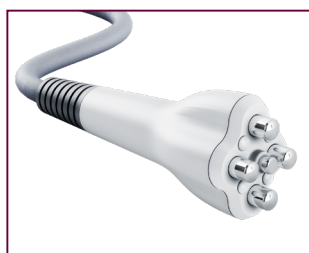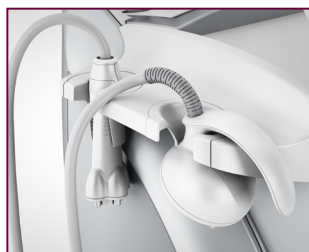

Oficinas corporativas 235 Yorkland Blvd, Suite 900 | Toronto, ON, M2J 4Y8

France: Venus Concept France Le Carré Haussmann Evry 52 Boulevard de l'Yerres 91000 Evry-Courcouronnes, France

Tel: 888-907-0115 Visitez notre site sur venusconcept.com



¹Wanitphakdeedecha, R., & Manuskiatti, W. (2006). Treatment of cellulite with a bipolar radiofrequency, infrared heat, and pulsatile suction device: a pilot study. *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications*, 5(4), 284-288.

²Alexis, A. (2013). Lasers and light-based therapies in ethnic skin: Treatment options and recommendations for Fitzpatrick skin types V and VI. *British Journal of Dermatology*, 169, 91-97. doi:10.1111/bjd.12526

³Soda, A., Ikehara, T., Kinouchi, Y., & Yoshizaki, K. (2008). Effect of exposure to an extremely low frequency-electromagnetic field on the cellular collagen with respect to signaling pathways in osteoblast-like cells. *The Journal of Medical Investigation*, 55 3-4, 267-78.

⁴Callaghan, M. J., Chang, E. I., Seiser, N., Asarabi, S., Ghali, S., Kinnucan, E. R., Gurtner, G. C. (2008). Pulsed Electromagnetic Fields Accelerate Normal and Diabetic Wound Healing by Increasing Endogenous FGF-2 Release. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 121(1), 130-141. doi:10.1097/01.prs.0000293761.27219.84