



NO SWEAT, NO STRESS  
EFFEKTIV GEGEN  
SCHWEISS UND GERUCH



[WWW.CALISTAMEDICAL.CH](http://WWW.CALISTAMEDICAL.CH)

 @calistamedical\_ch



## BESCHREIBUNG

**NO SWEAT, NO STRESS**  
**EFFEKTIV GEGEN SCHWEISS UND GERUCH**

MiraDry ist die einzige von der FDA zugelassene Behandlung, mit der Schweiß- und Duftdrüsen im Achselbereich sicher und dauerhaft in nur einer Sitzung dank thermischer Energie stark reduziert werden.

Das miraDry System verwendet Mikrowellen mit idealer Energieform, um Schweiß- und Geruchsdrüsen zu behandeln. Sie erzeugen genügend Hitze im Bereich der Drüsen, um diese sicher zu beseitigen. Das spezielle Kühlsystem des miraDry sorgt zusätzlich für eine angenehme und sichere Behandlung.

## HIGHLIGHTS

- Sichere, non-invasive & effektive Behandlung
- Gegen Schweiß und Geruch - kein kompensierendes Schwitzen
- Sofortige und dauerhafte Ergebnisse in 1-2 Behandlungen
- für alle & für jeden Hauttyp
- FDA-zugelassen & klinisch erwiesen

**Einfach.**  
**Sicher.**  
**Dauerhaft.**


## FUNKTIONSWEISE & TECHNOLOGIE

### BESEITIGUNG DER SCHWEISS- UND DUFTDRÜSEN DANK THERMISCHER MIKROWELLEN-ENERGIE

Schweißdrüsen werden zur Kühlung des Körpers benötigt. Der Körper hat jedoch 2 – 4 Millionen Schweißdrüsen, von denen sich nur etwa 2% in den Achselhöhlen befinden. Die Beseitigung dieser 2% der Schweißdrüsen beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, sich abzukühlen, in keiner Weise.


Für ein optimales Behandlungsergebnis wird die Haut und die Drüsen näher an die Behandlungsfläche gebracht, was durch ein leicht spürbares Vakuum erfolgt. Das Saughandstück zieht die Haut von den tieferen Strukturen weg und bietet maximalen Kontakt mit der hydrokeramischen Kühlfläche. Um die Haut zu schützen und die höchsten Komfort zu gewähren, kühlt das System die Haut gleichzeitig.

Schliesslich wird die thermische Energie abgegeben, die die Schweiß- und Duftdrüsen beseitigt. Das System stabilisiert das Gewebe und ermöglicht einen ungehinderten Energiedurchfluss.

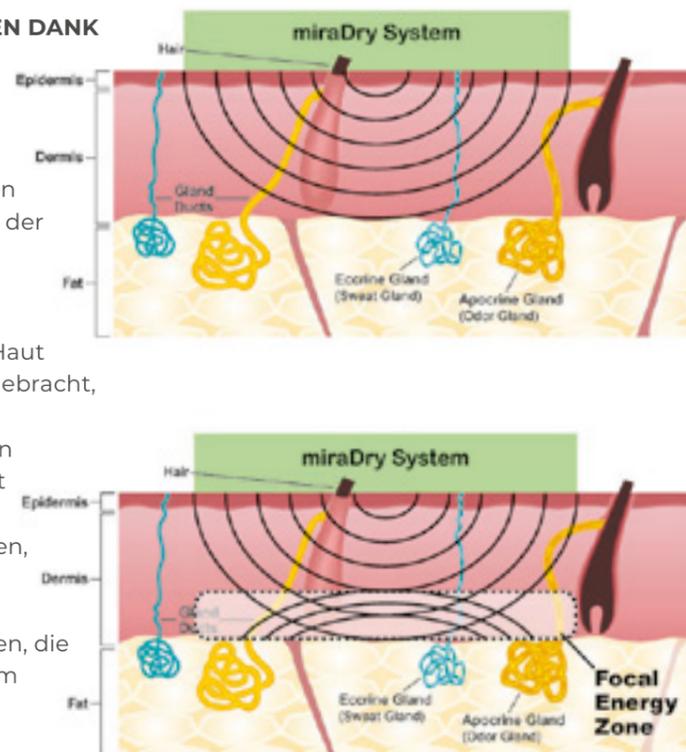

Apokrine und merokrine Drüsen sind in hoher Dichte und unterschiedlicher Tiefe (2-5 mm) an der Haut-Fett-Grenzfläche vorhanden. Um eine dauerhafte Zerstörung der Drüsen zu erreichen, ist eine hohe Temperatur von über 60°C erforderlich.


Aufgrund der Dichte der Drüsen muss das gesamte Gewebevolument, in dem sich die Drüsen befinden, auf hohe Temperaturen erhitzt werden, wobei die Epidermis, die obere Dermis und die darunter liegenden empfindlichen Strukturen zu schützen sind. Sobald diese Drüsen beseitigt sind, wachsen sie nicht mehr nach.

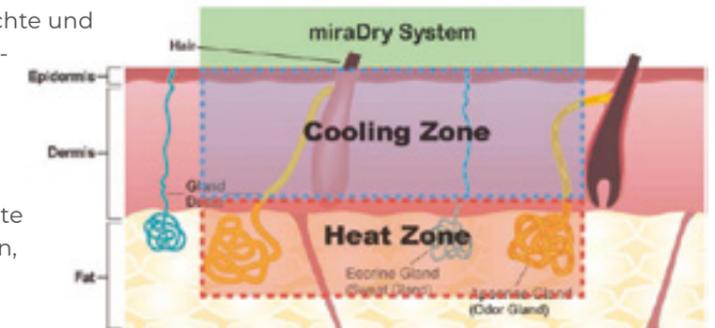

## Klinisch nachgewiesene Ergebnisse!

### RESULTATE


**81% Schweißreduzierung nach 12 Monaten**

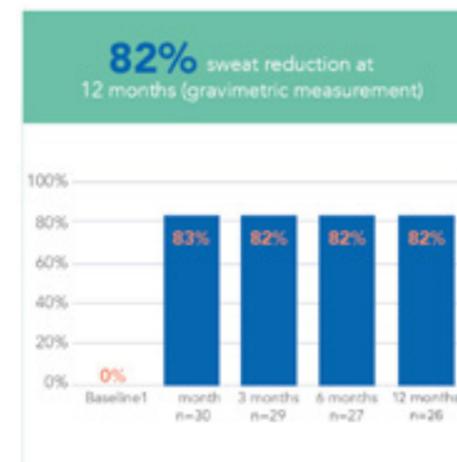

**100% der PatientInnen werden nach 24 Monaten nicht mehr durch Schweiß gestört**



**89% der PatientInnen stören sich nach 24 Monaten nicht mehr am Geruch**

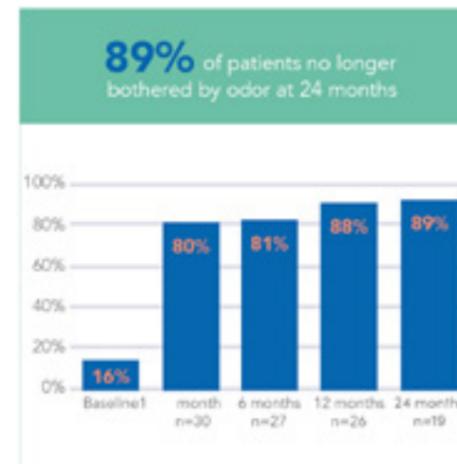



## Gegen Schweiß & Geruch. Sofort und dauerhaft.

Die einzige von der FDA  
zugelassene Behandlung,  
mit der Schweiß- und  
Duftdrüsen im Achselbereich  
sicher und dauerhaft in  
nur einer Sitzung dank  
thermischer Energie  
stark reduziert werden.



**Calista GmbH** | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld  
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50  
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch