

VENUS VERSA

LE SYSTEME MULTI-TRAITEMENT

LA RÉJUVÉNATION DE LA PEAU, L'ÉPILATION, LE TRAITEMENT DE L'ACNÉ,
LE RENOUVELLEMENT DE LA PEAU, L'ESTHÉTIQUE DU CORPS, L'ANTI-ÂGE



 **calista**
medical

WWW.CALISTAMEDICAL.CH

 @calistamedical_ch

VENUS VERSA



DESCRIPTION

LE SYSTEME MULTI-TRAITEMENT

Venus Versa utilise la lumière intense pulsée (IPL) pour traiter les lésions vasculaires et pigmentées, notamment l'épilation, l'acné et la thérapie photodynamique (PDT), ainsi que la radiofréquence nanofractionnée pour le renouvellement de la peau et la radiofréquence multipolaire combinée à des champs d'impulsions électromagnétiques pour la réduction de la cellulite et le raffermissment de la peau. Venus Versa est un système multi-traitement extrêmement polyvalent pour la réjuvenation de la peau, l'épilation, le traitement de l'acné, le renouvellement de la peau, l'esthétique du corps et l'anti-âge.

POINTS CLES

Venus Versa est la plateforme multi-applications la plus polyvalente, permettant les procédures esthétiques non chirurgicales les plus demandées. C'est le seul système qui combine trois technologies uniques:

- Lumière intense pulsée (IPL) avec technologie SmartPulse et refroidissement avancé en temps réel
- NanoFractional RF avec SmartPulse
- Technologie propriétaire (MP)² combinant la radiofréquence (RF) multipolaire et les champs électromagnétiques pulsés (PEMF).

LES TRAITEMENTS ESTHETIQUES LES PLUS DEMANDES DANS UN SEUL POSTE DE TRAVAIL

- Réjuvenation de la peau
- Epilation
- Traitement de l'acné
- Renouvellement de la peau
- Redéfinition des contours du corps
- Anti-âge

FONCTIONNEMENT ET TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE ET APPLICATEURS IPL



Technologie Smartpulse pour le réjuvenation de la peau, epilation et traitement de l'acné avec un système de refroidissement en temps réel pour une distribution d'énergie précise et régulière vers la cible choisie. Cette technologie offre une optimisation avancée des impulsions afin d'obtenir un profil d'énergie et de longueur d'onde parfait à chaque impulsion.

Réjuvenation de la peau

La technologie IPL délivre des impulsions d'énergie directes sur des zones ciblées de la peau pour traiter efficacement les lésions pigmentées et vasculaires.

Epilation

La technologie IPL détruit les follicules pileux en ciblant le pigment. Les applicateurs XL avec des tailles de point plus grandes permettent des traitements rapides et efficaces.

Traitement de l'acné

L'applicateur AC Dual IPL combine la lumière bleue et la lumière rouge, qui sont émises simultanément à chaque impulsion. La lumière bleue cible et détruit la bactérie P. Acnes responsable de l'acné, tandis que la lumière rouge réduit l'inflammation et accélère la guérison.

APPLICATEUR RF NANOFRACTIONNEL

Technologie Smartscan pour le renouvellement de la peau dans laquelle les NanoFractional RF avec la technologie SmartPulse sont émises sur une surface de base plus petite avec des densités de zone d'impact variables dans une seule pointe, ce qui permet des traitements sûrs pour tous les types de peau.



APPLICATEURS (MP)²: L'effet synergique de la RF multipolaire et des PEMF


(MP)² augmente de manière synergique la production de collagène par deux mécanismes indépendants: la RF multipolaire (thermique) et les PEMF (non thermique). La RF stimule directement les fibroblastes, tandis que les PEMF stimulent la prolifération des fibroblastes en libérant le facteur de croissance FGF-2. Ensemble, ils provoquent une augmentation de la synthèse de collagène. (MP)² a démontré son efficacité dans le remodelage du collagène pour raffermir la peau et créer de nouveaux capillaires qui renouvellent l'apport sanguin.

L'applicateur **DIAMOND POLAR** est utilisé pour le visage et le cou, l'applicateur **OCTIPOLAR** pour le corps.



RESULTATS

Rides et ridules

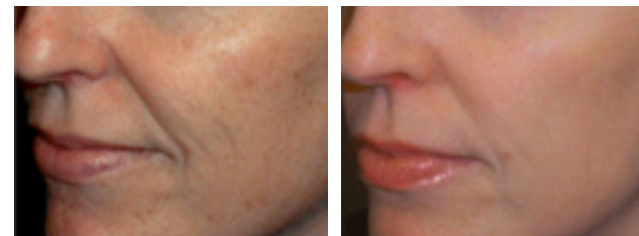

Rides et ridules



Rides et ridules



Cicatrices d'acné



Epilation



Cicatrices





Un système multi-traitement
extrêmement polyvalent pour
la réjuvenation de la peau,
l'épilation, le traitement de
l'acné, le renouvellement de
la peau, l'esthétique du corps
et l'anti-âge.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Voltage	100–240 VAC, 12.5A, 50–60Hz, Single Phase
Dimensions	65 cm x 55 cm x 110 cm / 25.6 in x 21.7 in x 43.3 in (DxWxH)
Weight	35 Kg / 77 lb.

SR515 / SR580 IPL APPLICATORS

Wavelength	515–950 nm, 580–950 nm
Optical Energy	5–25 J/cm ²
Pulse Duration	5–20 ms
Spot Size	10 mm x 30 mm
Pulse Repetition Rate	Up to 3 Hz

HR650 (XL) / HR690 (XL) IPL APPLICATORS

Wavelength	650–950 nm, 690–950 nm
Optical Energy	5–20 J/cm ²
Pulse Duration	20–50 ms
Spot Size	10 mm x 30 mm (XL: 20 mm x 30 mm)
Pulse Repetition Rate	Up to 2 Hz

AC DUAL IPL APPLICATOR

Wavelength	415–480 nm, 630–950 nm
Optical Energy/Fluence	5–25 J/cm ²
Pulse Duration	5–20 ms
Spot Size	10 mm x 30 mm
Pulse Repetition Rate	Up to 2 Hz

NANOFRACTIONAL RADIO FREQUENCY APPLICATOR

RF Frequency	460 KHz
Fuse	3.15A, 250V
Max. Output Energy	62 mJ/pin
Depth Ablation	500 microns
Number of Pins	160

DIAMONDPOLAR & OCTIPOLAR APPLICATORS

RF Frequency	1 Mhz
RF Output Power	0–150 Watts
Number of (MP)2 Synthesizers	Up to 8
Magnetic Pulse Frequency	15 Hz
Pulsed Magnetic Field Flux	Up to 15 Gauss



Calista GmbH | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch