



VENUSVIVA

PROFESSIONNELLES
HAUTERENEUERUNGSGERÄT



calista
medical

WWW.CALISTAMEDICAL.CH

 @calistamedical_ch

VENUS VIVA



BESCHREIBUNG

DAS LEICHTE HAUTERENEUERUNGSGERÄT

Venus Viva ist ein hochgradig anpassbares, professionelles Gerät für die Hauterneuerung. Es ist eine Alternative zu Microneedling und fraktionierten Laserbehandlungen und liefert außergewöhnliche Ergebnisse mit geringer Ausfallzeit für alle Hauttypen. Genutzt wird Nano-Fractional RF mit SmartScan-Technologie, die den AnwenderInnen die Kontrolle über Ablation, Koagulation und Hauterneuerung ermöglicht, um leichte bis schwere Hautschäden zu beheben.

Venus Viva wird verwendet bei:

- **(Akne-)Narben**
- **Verbesserung der Hautstruktur**
- **Hautstraffung**
- **Reduktion von Falten**
- **Gesichtsverjüngung**
- **Schwangerschaftsstreifen**

82% Patientenzufriedenheit!

HIGHLIGHTS

- Hohe PatientInnenzufriedenheit
- Sicher und effektiv für alle Hauttypen
- Nicht-invasiv und wirksam mit sofortigen und langfristigen Resultaten
- Geringe bis keine Ausfallzeiten


FUNKTIONSWEISE & TECHNOLOGIE

VENUS VIVA APPLIKATOR

Für Aknenarben, andere Narben, Dehnungstreifen, Rosazea, Dyschromie, tiefen Falten, vergrößerten Poren und ungleichmäßiger Hautstruktur sowie Pigmentierung bei allen Hauttypen.


Das Venus Concept RF-Wärmemuster ermöglicht eine tiefe dermale Erwärmung, während die Integrität der Epidermis erhalten bleibt. Die von RF erzeugte Wärme beginnt an der Oberfläche und breitet sich ellipsenförmig unter der Haut aus.

Je nach gewählter Einstellung ist der größte Erhitzungsschaden entweder relativ oberflächlich (100 Mikrometer) oder aggressiver und tiefer (500 Mikrometer). In beiden Fällen bleibt die Epidermis größtenteils intakt und nur ein Teil des Schadens ist mit bloßem Auge sichtbar.

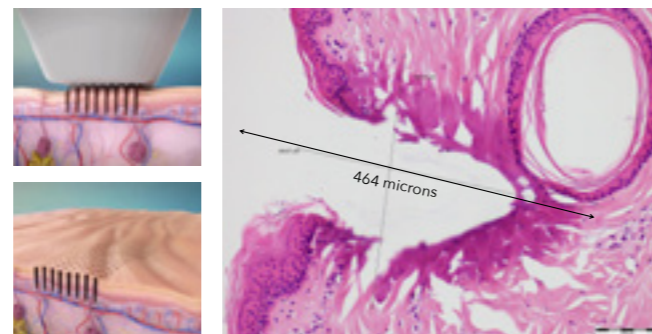

PATENTIERTE SPITZEN-TECHNOLOGIE

- Große Spotgröße für schnellere Behandlungen
- Der SmartScan-Algorithmus sorgt für eine gleichmäßige Energieverteilung in der Haut und reduziert so das Risiko von PIH3

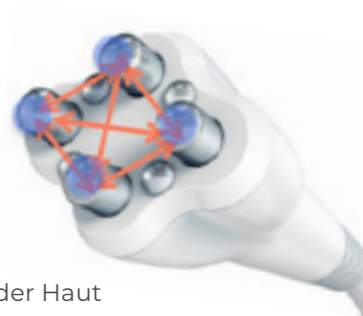

DIAMONDPOLAR APPLIKATOR MIT (MP)2 TECHNOLOGIE

Sorgt für eine massive Erwärmung des Gewebes, die eine Kontraktion und Stimulierung des Kollagens bewirkt, mit dem sofortigen Effekt eines festeren und strafferen Aussehens der Haut


- Nicht-invasive Faltenreduzierung und Hautstraffung
- Bewährte (MP)2-Technologie, die multipolaren RF und PEMF kombiniert

RESULTATE


Feine Linien & Falten




Aknenarben

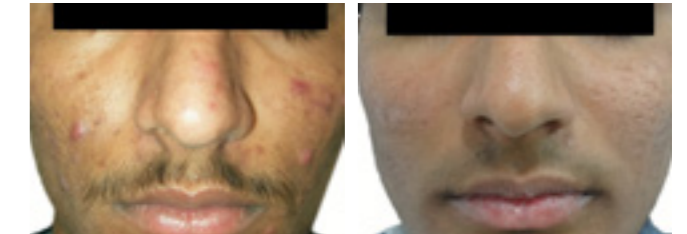

Feine Linien & Falten

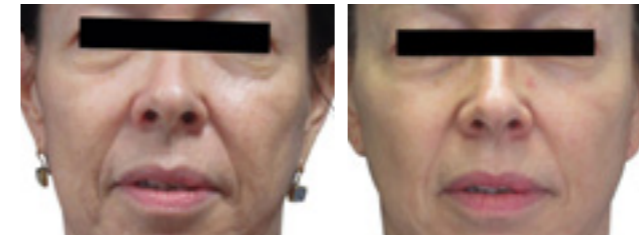


Aknenarben

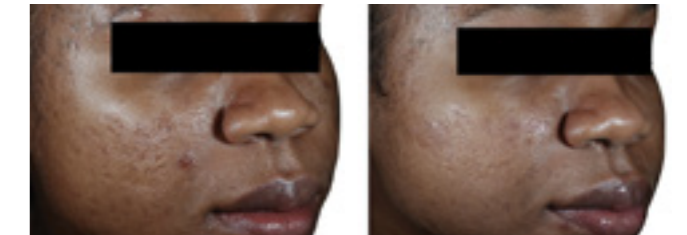

Feine Linien & Falten



Rosazea

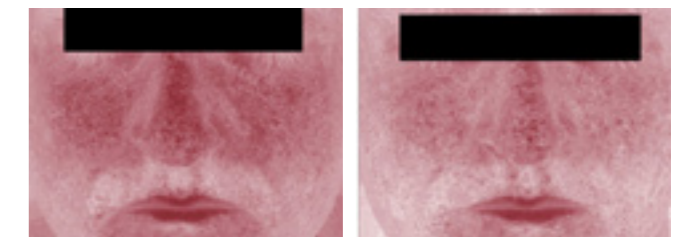



Ein hochgradig anpassbares,
professionelles Gerät
für die Hauterneuerung

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Voltage	100/120/240V ~, 350W (Max.), 50/60 Hz
Output RF Frequency	1 MHz, 460 KHz
Fuse	3.15A, 250V
Max. RF Output Power (Diamond applicator)	Up to 60 watts
Max. Output Energy (NanoFractional RF appl.)	62 mJ/pin
Magnetic Pulse Frequency	15 Hz
Magnetic Field	15 Gauss
Dimensions	40 cm x 38 cm x 28 cm / 15.75 in x 14.96 in x 11.02 in (D x W x H)
Weight	8 kg / 17.6 lb



Calista GmbH | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch