



VENUSVIVA

L'APPAREIL PROFESSIONNEL DE
RÉJUVÉNATION DE LA PEAU



calista
medical

WWW.CALISTAMEDICAL.CH

 @calistamedical_ch

VENUS VIVA



DESCRIPTION

L'APPAREIL LEGER DE RÉJUVÉNATION DE LA PEAU

Venus Viva est un appareil professionnel hautement personnalisable utilisé pour la réjuvenation de la peau. C'est une alternative au microneedling et aux traitements au laser fractionné, qui donne des résultats exceptionnels avec peu de temps d'arrêt pour tous les types de peau. Il utilise la radiofréquence (RF) nanofractionnelle avec la technologie SmartScan, qui assure au praticien le contrôle sur l'ablation, la coagulation et la réjuvenation de la peau pour remédier à des dommages cutanés légers à graves.

Venus Viva est utilisé en cas de:

- Cicatrices (d'acné)
- Amélioration de la structure de la peau
- Raffermissment de la peau
- Réduction des rides
- Rajeunissement du visage
- Vergetures

82% de satisfaction des patients!

POINTS CLES

- Une forte satisfaction des patients
- Sûr et efficace pour tous les types de peau
- Non invasif et efficace avec des résultats immédiats et à long terme
- Pratiquement aucun temps d'arrêt


FONCTIONNEMENT ET TECHNOLOGIE

VENUS VIVA APPLICATEUR

Pour les cicatrices d'acné, les autres cicatrices, les vergetures, la rosacée, la dyschromie, les rides profondes, les pores dilatés et le grain de peau irrégulier ainsi que la pigmentation de tous les types de peau.


Le modèle de chaleur RF Venus Concept permet un réchauffement dermique profond tout en préservant l'intégrité de l'épiderme. La chaleur générée par RF commence à la surface et se propage en ellipse sous la peau.

Selon le réglage choisi, le plus grand Les dommages causés par la chaleur sont soit relativement superficiels (100 microns), soit plus agressifs et profonds (500 microns). Dans les deux cas, l'épiderme reste en grande partie intact et seule une partie des dommages est visible à l'œil nu.

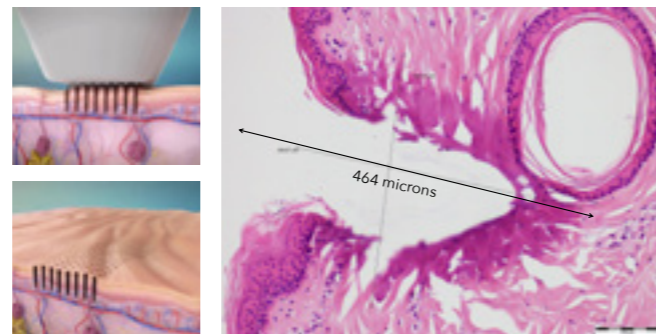

TECHNOLOGIE DE POINTE BREVETÉE

- Grande taille de spot pour des traitements plus rapides
- L'algorithme SmartScan assure une distribution uniforme de l'énergie dans la peau, réduisant ainsi le risque de PIH3

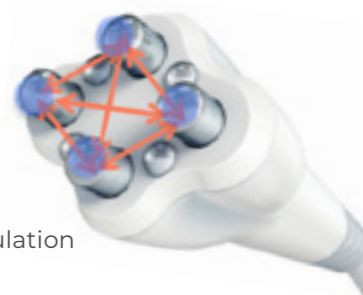

APPLICATEUR DIAMONDPOLAR AVEC TECHNOLOGIE (MP)2

Procure un réchauffement massif des tissus, ce qui provoque une contraction et une stimulation du collagène, avec l'effet immédiat d'une peau d'apparence plus ferme et plus tonique.


- Réduction des rides et raffermissment de la peau non invasifs
- Technologie (MP)2 éprouvée combinant la RF multipolaire et la PEMF

RESULTATS


Rides et ridules



Cicatrices d'acné

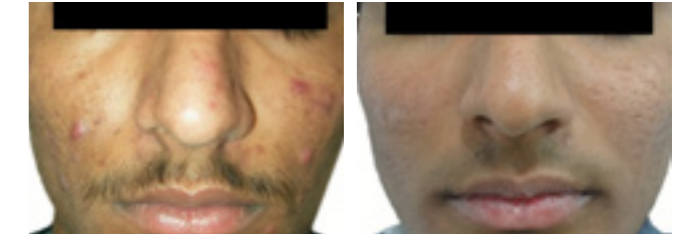

Rides et ridules

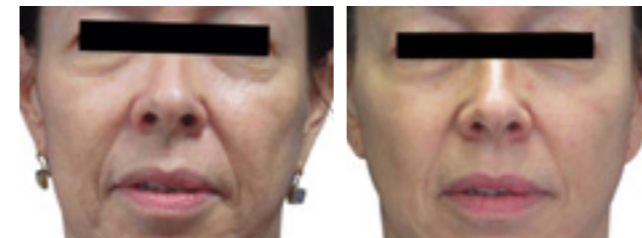


Cicatrices d'acné



Rides et ridules



Rosacée

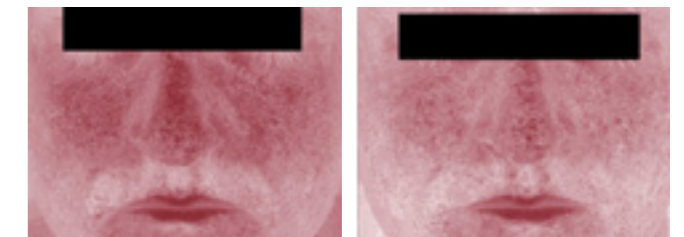



**Un appareil professionnel hautement
personnalisable utilisé
pour la réjuvenation de la peau**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Voltage	100/120/240V ~, 350W (Max.), 50/60 Hz
Output RF Frequency	1 MHz, 460 KHz
Fuse	3.15A, 250V
Max. RF Output Power (Diamond applicator)	Up to 60 watts
Max. Output Energy (NanoFractional RF appl.)	62 mJ/pin
Magnetic Pulse Frequency	15 Hz
Magnetic Field	15 Gauss
Dimensions	40 cm x 38 cm x 28 cm / 15.75 in x 14.96 in x 11.02 in (D x W x H)
Weight	8 kg / 17.6 lb



Calista GmbH | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch